

AVANOS | NEOMED\*

NEOMED\* PRODUCTCATALOGUS

ENTERALE VOEDING - EEN VITALE VERBINDINGSLIJN



# INHOUDSOPGAVE

Introductie	3
-------------	---

## MOEDERMELKFLESJES

Flesjes voor het opvangen van moedermelk	4
Transferdeksels	4

## NASOGASTRISCHE / OROGASTRISCHE VOEDINGSSONDES

Pvc & polyurethaan	5,6
Silicone	7
Reinigingstool	7
GRAVITYPRO <sup>®</sup> spuit	8
Verlengleidingen	9
Orale / enterale spuiten	10,11
Accessoires bij spuiten	11
Spuiten voor apotheekgebruik	12

## ACCESSOIRES

Apotheekdoppen	12
Adapters	13
Vuldopkoppeling	13
Vulrietjes	13
DOSEMATE <sup>®</sup>	14

Een uitgebreide serie producten voor de toediening van enterale voeding die gericht is op zowel klinische werkzaamheid als patiëntveiligheid.

### De rol van hulpmiddelen bij enterale voeding

Het volumeverlies van moedermelk in het enterale voedingsstelsel kan worden verminderd door de inzet van enterale hulpmiddelen met bijbehorende aansluitingen, unieke ontwerpkenmerken, gepatenteerde interfaces, loze ruimte en vulvolumes. Bovendien kan het vetverlies door het scheiden van vetten worden beperkt via discrete componenten in het systeem.<sup>1</sup>

De voeding van patiënten op de NICU wordt vaak versterkt en aangevuld om ervoor te zorgen dat ze de optimale voeding binnenkrijgen. Artsen hebben oplossingen bedacht om het verlies van vet- en voedingsstoffen te verminderen.

### Problemen met de afgifte van lipiden

Sommige protocollen suggereren dat bij enterale toediening de tip van de spuit omhoog moet worden gehouden. Voeding met behulp van zwaartekracht maakt dat fysiek onmogelijk. Bij toediening via een voedingspomp sluiten veel pompfabrikanten een verticale positie van de spuit uit. Bij veel pompen wordt een verticale positie niet geadviseerd en wordt dit zelfs gecontra-indiceerd in de gebruikshandleidingen.

### Veiligheid & preventie van verkeerde aansluitingen

Het initiatief om verkeerde aansluitingen tussen de verschillende behandelings-systemen in de gezondheidszorg te voorkomen, heeft geresulteerd in het opstellen van ISO 80369-normen. De norm ISO 80369-3 beschrijft de afmetingen en functionele vereisten van de enterale aansluitingen met een kleine binnendiameter, die in de branche bekendstaan als ENFit®.

1. Wages SA. Examination of Fat Loss from Human Breast Milk in Oral/Enteral Syringes from Different Manufacturers. Alpharetta, GA: April 2014. Op verzoek verkrijgbaar

# BEKER VOOR MOEDERMELK EN COLOSTRUM MET TRANSFERDEKSEL

## De rol van hulpmiddelen bij enterale voeding

Onderzoek wijst uit dat klinische complicaties het best kunnen worden voorkomen door het onmiddellijk en regelmatig toedienen van verse moedermelk.<sup>1</sup>

Het volumeverlies van moedermelk in het enterale voedingssysteem kan worden verminderd door de inzet van enterale hulpmiddelen met bijbehorende aansluitingen, unieke ontwerpkenmerken, gepatenteerde interfaces, loze ruimte en vulvolumes. Bovendien kan het vetverlies door het scheiden van vetten worden beperkt.<sup>2</sup>

De juiste preparatie en handling van voeding voor zuigelingen en kinderen in de klinische praktijk is cruciaal voor het afgeven van veilige en accurate voeding. Volledige traceerbaarheid van bereide voeding is een must in alle zorgomgevingen.<sup>3</sup>

Moeders kunnen kiezen uit verschillende maten bekers, afgestemd op de hoeveelheid melk die opgevangen moet worden. Hiermee wordt voorkomen dat moeders die weinig borstvoeding hebben, ontmoedigd raken door te grote bekers.<sup>3</sup>

**Fles voor het opvangen van moedermelk** - De NEOMED<sup>®</sup> flessen beschikken over duidelijke en nauwkeurige volumemarkeringen in stappen van 1 ml, ten behoeve van exacte vermenging en samenstelling:

- Unieke gewelfde bodem zorgt ervoor dat het volume zich in een smal gedeelte ophoopt waardoor geen druppel colostrum achterblijft
- Het voetstuk voorkomt dat de fles weg kan rollen
- Universele schroefdop past op de meeste borstschilden
- Vetgedrukte maatstrepen in ml en in oz
- Speciale ruimte voor etiket aan zijkant van fles
- Paars transferdeksel met speciale dop



## Beker voor moedermelk en colostrum met transferdeksel

PRODUCTCODE	BESCHRIJVING	VERPAKKINGSEENHEID
PSC-1NC	ENFit <sup>®</sup> opvangbeker van 30 ml, steriel, paars	100
PSC-2NC	ENFit <sup>®</sup> opvangbeker van 60 ml, steriel, paars	40

## Het NEOMED<sup>®</sup> ENFit<sup>®</sup> transferdeksel past op vrijwel alle standaard flessen

PTL-NC	ENFit <sup>®</sup> transferdeksel, steriel, paars	200
--------	---	-----

1. Dutta, Sourabh, et Balpreet Singh. "Guidelines for Feeding Very Low Birth Weight Infants." 15 Jan. 2017. 2. Wages SA. Examination of Fat Loss from Human Breast Milk in Oral/Enteral Syringes from Different Manufacturers. Alpharetta, GA: April 2014. Op verzoek verkrijgbaar 3. BDA Guidelines for the Preparation and Handling of Expressed and Donor Breast Milk and Specialist Feeds for Infants and Children in Neonatal and Paediatric Health Care Settings 2019

## NASOGASTRISCHE / OROGASTRISCHE ENTERALE VOEDINGSSONDES

NEOMED\* enterale voedingssondes zijn verkrijgbaar in silicone, polyurethaan en pvc.

Als voortrekker in de overgang naar ENFit® zet AVANOS/NEOMED\* zich in voor het verbeteren van de patiëntveiligheid door (ENFit®) producten aan te bieden die voldoen aan ISO 80369-3 en zo het risico op verkeerde enterale aansluitingen verminderen.

ENFit® - EÉN OPLOSSING, ÉÉN AANSLUITING.

### Ondersteunen van infectiepreventieprotocollen

- NEOMED\* ENFit® voedingssondes hebben een open aanzetstuk, dat bacteriële groei helpt te verminderen
- NEOMED\* voedingssondes van polyurethaan en silicone beschikken over een open distale tip en drie verspringende zijdelingse uitgangen zonder verborgen holtes, waardoor kolonisatie wordt geminimaliseerd
- Radiopake streep en vetgedrukte markeringen bij elke centimeter helpen bij het controleren van de plaatsing
- Regelmatige numerieke centimetermarkering zodat verplaatsing van de sonde bij het neusgat kan worden geconstateerd, wat nauwkeurige documentatie bevordert
- ENFit® reinigingstool: speciaal ontworpen om aanslag uit het aanzetstuk van de voedingssonde te verwijderen

**Alle NEOMED\* voedingssondes hebben een vastgeklonken dop om het risico op verstikking door kleine losse onderdelen te voorkomen.**





## PVC

Pvc ENFit® connector zonder voerdraad, met open aanzetstuk, paarse radiopake streep, numerieke centimetermarkeringen, gesloten distaal uiteinde, openingen aan zijkant

**Gebruiksduur van 30 dagen in situ – aanbevolen tot 5 dagen**

PRODUCTCODE	BESCHRIJVING	VERPAKKINGSEENHEID	VULVOLUME
PFTS5.0V-NC	Pvc, paarse radiopake streep, 5 Fr x 40 cm	25	0,4 ml
PFTM5.0V-NC	Pvc, paarse radiopake streep, 5 Fr x 60 cm	25	0,5 ml
PFTS6.5V-NC	Pvc, paarse radiopake streep, 6,5 Fr x 40 cm	25	0,6 ml
PFTM6.5V-NC	Pvc, paarse radiopake streep, 6,5 Fr x 60 cm	25	0,9 ml
PFTL6.5V-NC	Pvc, paarse radiopake streep, 6,5 Fr x 90 cm	25	1,3 ml
PFTS8.0V-NC	Pvc, paarse radiopake streep, 8 Fr x 40 cm	25	0,9 ml
PFTM8.0V-NC	Pvc, paarse radiopake streep, 8 Fr x 60 cm	25	1,3 ml
PFTL8.0V-NC	Pvc, paarse radiopake streep, 8 Fr x 90 cm	25	1,8 ml

## POLYURETHAAN

Polyurethaan ENFit® connector zonder voerdraad, met open aanzetstuk, paarse radiopake streep, numerieke centimetermarkeringen, open distale atraumatische tip, openingen aan zijkant

**Gebruiksduur van 30 dagen in situ**

PRODUCTCODE	BESCHRIJVING	VERPAKKINGSEENHEID	VULVOLUME
PFTS4.0P-NC	Polyurethaan, paarse radiopake streep, 4 Fr x 40 cm	10	0,2 ml
PFTS5.0P-NC	Polyurethaan, paarse radiopake streep, 5 Fr x 40 cm	10	0,4 ml
PFTM5.0P-NC	Polyurethaan, paarse radiopake streep, 5 Fr x 60 cm	10	0,5 ml
PFTL5.0P-NC	Polyurethaan, paarse radiopake streep, 5 Fr x 90 cm	10	0,7 ml
PFTS6.5P-NC	Polyurethaan, paarse radiopake streep, 6,5 Fr x 40 cm	10	0,6 ml
PFTM6.5P-NC	Polyurethaan, paarse radiopake streep, 6,5 Fr x 60 cm	10	0,8 ml
PFTL6.5P-NC	Polyurethaan, paarse radiopake streep, 6,5 Fr x 90 cm	10	1,2 ml
PFTS8.0P-NC	Polyurethaan, paarse radiopake streep, 8 Fr x 40 cm	10	0,9 ml
PFTM8.0P-NC	Polyurethaan, paarse radiopake streep, 8 Fr x 60 cm	10	1,3 ml
PFTL8.0P-NC	Polyurethaan, paarse radiopake streep, 8 Fr x 90 cm	10	1,9 ml
PFTM10.0P-NC	Polyurethaan, paarse radiopake streep, 10 Fr x 109 cm	10	5,0 ml
PFTM12.0P-NC	Polyurethaan, paarse radiopake streep, 12 Fr x 109 cm	10	6,0 ml
PFTXL5.0P-NC	Polyurethaan, paarse radiopake streep, 5 Fr x 105 cm	10	0,8 ml
PFTXL8.0P-NC	Polyurethaan, paarse radiopake streep, 8 Fr x 105 cm	10	2,2 ml

## SILICONE



Siliconen ENFit® connector zonder voerdraad, met open aanzetstuk, paarse radiopake streep, numerieke centimetermarkeringen, open distale atraumatische tip, openingen aan zijkant

**Gebruiksduur van 30 dagen in situ**

PRODUCTCODE	BESCHRIJVING	VERPAKKINGSEENHEID	VULVOLUME
PFTS5.0S-NC	Silicone, paarse radiopake streep, 5 Fr x 40 cm	10	0,3 ml
PFTM5.0S-NC	Silicone, paarse radiopake streep, 5 Fr x 60 cm	10	0,4 ml
PFTL5.0S-NC	Silicone, paarse radiopake streep, 5 Fr x 90 cm	10	0,6 ml
PFTS8.0S-NC	Silicone, paarse radiopake streep, 8 Fr x 40 cm	10	0,7 ml
PFTM8.0S-NC	Silicone, paarse radiopake streep, 8 Fr x 60 cm	10	1,0 ml
PFTL8.0S-NC	Silicone, paarse radiopake streep, 8 Fr x 90 cm	10	1,3 ml

## REINIGINGSTOOL

De NEOMED® ENFit® voedingssonde met open aanzetstuk vermindert, gecombineerd met het gebruik van onze reinigingstool, bacteriële kolonisatie en ophoping van aanslag.

ENFit® gesloten aanzetstukken hebben een inkeping waarin aanslag zich kan ophopen.

PRODUCTCODE	BESCHRIJVING	VERPAKKINGSEENHEID
PNM-CA	ENFit® reinigingstool	24



## GRAVITYPRO\* SPUITEN

NEOMED\* GRAVITYPRO\* spuiten bieden een gebruiksvriendelijke klinische oplossing voor voeding met behulp van zwaartekracht.

NEOMED\* GRAVITYPRO\* spuiten hebben een geïntegreerd ophangelement zodat ze tijdens de zwaartekrachtvoeding niet in de hand gehouden hoeven te worden. Verder zijn ze voorzien van een beluchtingszone om blootstelling aan lucht te minimaliseren doordat ontluchting plaatsvindt terwijl de zuiger in de spuit blijft. Ze kunnen ook worden gebruikt met een enterale spuitpomp voor continue voeding.

### Geschikt voor zwaartekracht- en pompvoeding

Ideale reservoirs voor het opvangen van 'output' bij maagdecompressie

Geïntegreerd ophangelement - artsen hoeven niet meer zelf te zorgen voor ophangmateriaal, zoals tape

Beluchtingszone - dit ontwerp minimaliseert blootstelling aan lucht doordat ontluchting plaatsvindt terwijl de zuiger in de spuit blijft

Transparante cilinder, witte zuiger, paarse markeringen, paarse zelfrichtende dop, eenmalig gebruik



PRODUCTCODE	BESCHRIJVING	VERPAKKINGSEENHEID
PNM-S20NCV	20 ml ENFit® GRAVITYPRO* spuit, paars, steriel	100
PNM-S100NCV	100 ml ENFit® GRAVITYPRO* spuit, paars, steriel	40



# VERLENGLEIDINGEN VOOR NASO- / OROGASTRISCHE ENTERALE VOEDINGSSONDES

De Academy of Nutrition and Dietetics (AND) adviseert om verlengleidingen elke 4 uur te vervangen

## RECHT

- Heeft een proximale vastgeklonken sluiting
- Onze populairste mannelijke / vrouwelijke verlengleiding
- Set met reguliere diameter
- Geschikt voor pompvoeding en continue voeding

## VERTAKT

- Veelgebruikt op NICU's van niveau III, waaronder kinderziekenhuizen die regelmatig zorgen voor patiënten met een aangetast immuunsysteem en voor patiënten voor of na een maagoperatie
- Heeft een proximale vastgeklonken sluiting en een sluiting met distale dop
- Set met reguliere diameter - met de vertakte verlengleiding van 152 cm kunnen artsen medicatie toedienen zonder dat het gesloten enterale systeem wordt verbroken
- In sommige gevallen moet de binnendiameter van de verlengleiding groot genoeg zijn om viskeuze samenstellingen en moedermelk aangevuld met moedermelkversterker in poedervorm te laten doorstromen zonder dat er drukalarm klinkt van de pompen; tegelijkertijd mag de binnendiameter ook weer niet te groot zijn, omdat vulvolumes laag moeten worden gehouden

## EXTRA GROTE DIAMETER

- Maakt het toedienen van versterkte voeding mogelijk, met een rolklem om de stroom te starten of stoppen
- Gebruikt op NICU's van niveau III die vaak samengestelde of versterkte voeding gebruiken (voor neonatale en pediatrie patiënten)
- Verlengleidingen met grote diameter moeten korter zijn om het vulvolume onder de 2 ml te houden
- Heeft een proximale vastgeklonken sluiting



## VERLENGLEIDINGEN

PRODUCTCODE	BESCHRIJVING	VERPAKKINGSEENHEID	VULVOLUME
PEXT-60NC	152 cm ENFit® standaard verlengleiding, paars	50	1,8 ml
PEXT-60YNC	152 cm ENFit® vertakte verlengleiding, paars	50	1,8 ml
PEXT-48BNC	122 cm ENFit® verlengleiding met extra grote diameter, paars	50	1,8 ml
PEXT-8YNC	20 cm ENFit® vertakte verlengleiding, paars	50	0,6 ml
PEXT-18BNC	46 cm ENFit® verlengleiding met extra grote diameter XL, paars	50	1,4 ml
PEXT-30BNC	76 cm ENFit® verlengleiding met extra grote diameter XL, paars	50	1,9 ml

## ORALE / ENTERALE SPUITEN

Avanos hanteert een uitgebreid portfolio aan ENFit® en niet-ENFit® spuitjes, van 1 ml tot 100 ml. NEOMED® spuitjes zijn ontworpen met een excentrische tip en een solide zuiger van polypropyleen met een afgeplatte kop en een siliconen O-ring-afdichting. NEOMED® spuitjes zorgen voor een afname met **5% tot 15%** van het totale vetverlies dat normaliter optreedt bij concentrische enterale spuitjes.

### Toepassing van best practices

Onze handsfree, zelfrichtende doppen zijn ontworpen om overmatige handling te minimaliseren en een aseptische techniek te bevorderen. Onze spuitjes zijn vervaardigd als in één geheel gegoten cilinders, en zijn niet afhankelijk van adapters om een orale of ENFit® tip te creëren. NEOMED® zet zich in om te voldoen aan de aanbevolen best practices van de FDA, Joint Commission, GEDSA, ISMP en het ECRI Institute.

### Hoogwaardig materiaal

De zuiger is zo ontworpen dat de zijanten van de spuitcilinder volledig worden afgeveegd, wat zorgt voor optimale toediening. De spuit is gemaakt van polypropyleen materiaal, USP klasse VI, dat de afgifte van lipiden niet verstoort.

### Maximale voedingsafgifte

Dankzij de excentrische tip wordt bij plaatsing in een horizontale spuitpomp eerst colostrum afgegeven, waardoor de beschikbare voeding optimaal wordt gebruikt.

### Zuigerkop van polypropyleen

De NEOMED solide zuigerkop van polypropyleen met O-ring is afgeplat, waardoor er minder oppervlak is voor het ongewenst aanhechten van vet dan bij spuitjes met conische zuigerkoppen van rubber.

### Zuigerkop van rubber


Zuigertips van rubber zijn conischer, waardoor er meer oppervlak is waar lipide / vet zich kan aanhechten; namelijk zowel op de zuiger zelf als op het uiteinde van de spuit.

### Gekwalificeerd voor de volgende pompen:

SMITH Medfusion 3500 & 4500 (6, 12, 20, 35, 60, 100)

ABC 4100 (3, 6, 12, 20, 35, 60, 100)

BBraun Perfuser (3, 6, 12, 20, 35, 60)

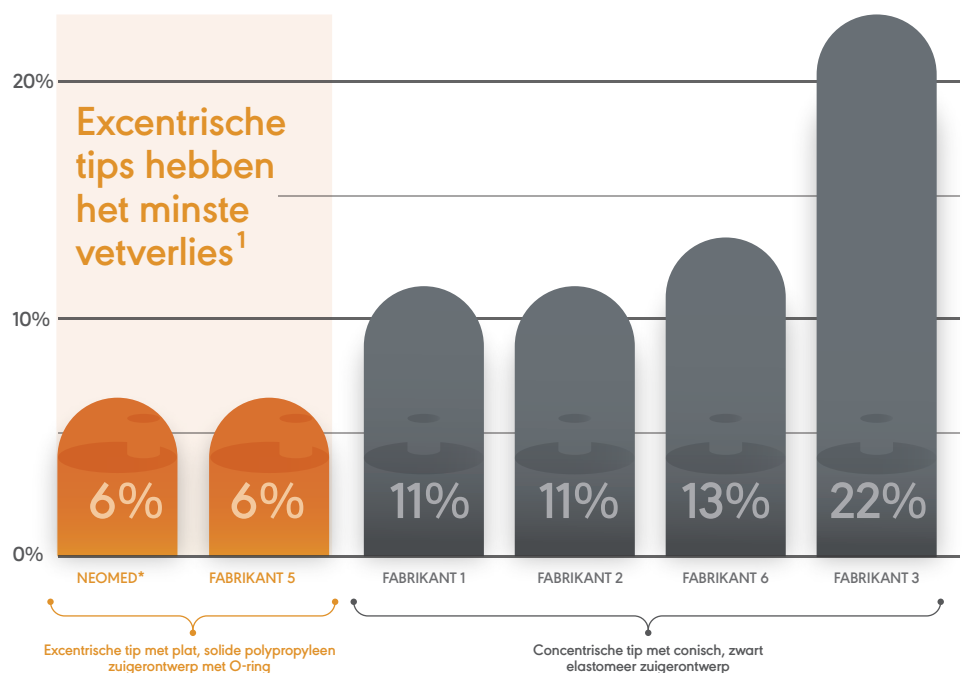

1. Wages SA. Examination of Fat Loss from Human Breast Milk in Oral/Enteral Syringes from Different Manufacturers. Alpharetta, GA: April 2014. Op verzoek verkrijgbaar

## ENFIT® SPUITEN

Low Dose Tip: maten 1 ml-6 ml om nauwkeurige dosering met laag volume te waarborgen  
 Transparante cilinder, witte zuiger, paarse markeringen, paarse zelfrichtende dop, eenmalig gebruik

PRODUCTCODE	BESCHRIJVING	VERPAKKINGSEENHEID
PNM-S1NC	1 ml ENFit® spuit, paars, steriel	200
PNM-S3NC	3 ml ENFit® spuit, paars, steriel	200
PNM-S6NC	6 ml ENFit® spuit, paars, steriel	200
PNM-S12NC	12 ml ENFit® spuit, paars, steriel	200
PNM-S20NC	20 ml ENFit® spuit, paars, steriel	100
PNM-S35NC	35 ml ENFit® spuit, paars, steriel	100
PNM-S60NC	60 ml ENFit® spuit, paars, steriel	100



## ORALE SPUITEN

PRODUCTCODE	BESCHRIJVING	VERPAKKINGSEENHEID
PNM-S1EO	1 ml orale spuit, paars, steriel	200
PNM-S3EO	3 ml orale spuit, paars, steriel	200
PNM-S6EO	6 ml orale spuit, paars, steriel	200
PNM-S12EO	12 ml orale spuit, paars, steriel	200



## ACCESSOIRES DE SERINGUES

### NEOSECURE\* dop

- Handsfree en zelfrichtend
- Bevordert aseptische techniek
- Minimaliseert de duur van de procescyclus

### Spuit-naar-spuit-koppeling

- Sluit ENFit® spuiten aan voor overdracht of vermenging
- Vereenvoudigt patiëntspecifieke dosering vanuit een andere spuit

### Speciaal verzegelde dop

- Verhoogt de veiligheid van de spuit en de inhoud hiervan vanaf het moment dat deze de apotheek verlaat tot het moment dat deze wordt afgegeven

PRODUCTCODE	BESCHRIJVING	VERPAKKINGSEENHEID
PNM-TCNC	ENFit® NEOSECURE* tipbeschermingsdopje, steriel, paars	200
PNS-TENC	ENFit® speciaal verzegelde dop, niet-steriel, paars	1000
PCO-FNC	ENFit® F-F spuitkoppeling, steriel, paars	100
PCO-FNC-NS	CENFit® F-F spuitkoppeling, niet-steriel, paars	400



## SPUITEN VOOR APOTHEEKGEBRUIK

Amberkleurige spuit blokkeert **63%** van het licht met golflengte van 290-450 nm

### AMBERKLEURIGE SPUITEN IN BULK



ENFit®		
PRODUCTCODE	BESCHRIJVING	VERPAKKINGSEENHEID
BA-S1NC	1 ml ENFit® spuit, amberkleurig, niet-steriel	500
BA-S3NC	3 ml ENFit® spuit, amberkleurig, niet-steriel	500
BA-S6NC	6 ml ENFit® spuit, amberkleurig, niet-steriel	500
BA-S12NC	12 ml ENFit® spuit, amberkleurig, niet-steriel	500

ORAAL		
PRODUCTCODE	BESCHRIJVING	VERPAKKINGSEENHEID
BA-S1EO	1 ml orale spuit, amberkleurig, niet-steriel	500
BA-S3EO	3 ml orale spuit, amberkleurig, niet-steriel	500
BA-S6EO	6 ml orale spuit, amberkleurig, niet-steriel	500
BA-S12EO	12 ml orale spuit, amberkleurig, niet-steriel	500

### ACCESSOIRES

#### Apotheekdoppen

- Bevordert nauwkeurige dosering door hetzelfde volume te verplaatsen als de ENFit® mannelijke connector
- Snel vullen door speciaal ontwerp
- Krachtgesloten verbinding zorgt voor minimale impact op processtroom, productiviteit en opstellen van cyclustijd



PRODUCTCODE	BESCHRIJVING	VERPAKKINGSEENHEID
PC-ANC	ENFit® apotheekdop, 18 mm, paars	25
PC-BNC	ENFit® apotheekdop, 20 mm, paars	25
PC-CNC	ENFit® apotheekdop, 22 mm, paars	25
PC-DNC	ENFit® apotheekdop, 24 mm, paars	25
PC-ENC	ENFit® apotheekdop, 28 mm, paars	25
PC-GNC	ENFit® apotheekdop, 33 mm, paars	25
PC-INC	ENFit® apotheekdop, 38 mm, paars	25

## ADAPTERS

PRODUCTCODE	BESCHRIJVING	VERPAKKINGSEENHEID
F00133	ENFit® transitieadapter met distaal uiteinde	30
F00148	Orale / Luer ENFit® transitieadapter	10

## VULDOPKOPPELING



- Geschikt voor het vullen van ENFit® spuitjes vanuit medicatieflesjes die zijn voorzien van oudere vuldoppen
- Werkt met de huidige orale flesadapters voor apotheken: indruk- en schroefadapters bedoeld voor orale spuitjes

PRODUCTCODE	BESCHRIJVING	VERPAKKINGSEENHEID
PC-EONC	ENFit® vuldopkoppeling, niet-steriel, paars	150
PCO-FNC-NS	ENFit® F-F spuitkoppeling, niet-steriel, paars	400

## VULRIETJES

- Beschikbaar in 7,7 cm en 15 cm. Rietje van 7,7 cm met minimale diameter is perfect geschikt voor de opname van medicatie vanuit kleine flacons
- Wanneer er bij het optrekken van kunstvoeding of moedermelk uit flesjes geen NEOMED® transferdeksel beschikbaar is, moet een rietje worden gebruikt om de bacteriële blootstelling te minimaliseren



PRODUCTCODE	BESCHRIJVING	VERPAKKINGSEENHEID	VULVOLUME
PEXT-3STBNC	7,7 cm ENFit® rietje, grote diameter, paars	50	0,1 ml
PEXT-6STBNC	15 cm ENFit® rietje, grote diameter, paars	50	0,7 ml
PEXT-3STNC	7,7 cm ENFit® rietje, paars	50	0,1 ml



## ORAL DOSEMATE\*

NEOMED\* biedt een innovatief productaanbod met o.a. DOSEMATE\*, een toedieningstip met ergonomisch ontwerp dat patiënten comfort biedt bij orale dosering direct in de mond met een ENFit® spuit.

DOSEMATE\* DL is perfect geschikt voor het doseren van orale medicatie direct in de wang of achter in de mond.

Zowel DOSEMATE\* als DOSEMATE\* DL biedt comfort bij het oraal toedienen van medicatie aan neonatale en pediatrie patiënten en vermindert de zorgen over het plaatsen van spuittips met schroefdraad of veiligheidslipjes rechtstreeks in de mond van een baby.

PRODUCTCODE	BESCHRIJVING	VERPAKKINGSEENHEID
POA-TNCL	ENFit® DOSEMATE* DL, paars	24
POA-TNC	ENFit® DOSEMATE*, paars	50



## NOTA'S

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

*Het NEOMED\* portfolio - een uitgebreide serie producten voor enterale voeding, medicatie en veiligheid die voldoen aan de specifieke behoeften van pasgeborenen en baby's met een laag geboortegewicht*



---

# AVANOS

Neem voor meer informatie contact op met  
het Customer Service Team van Avanos:

Tel: 0800 023 10 79 (gratis uit NL)  
Fax: 0800 023 10 78 (gratis uit NL)

Tel: 0800 78 775 (gratis uit BE)  
Fax: 0800 78 774 (gratis uit BE)

[customerservice.bnl@avanos.com](mailto:customerservice.bnl@avanos.com)